



LA MESA PARA 7 VIDAS

La revolución en mesas de exploración felina, diseñada para durar 7 vidas con superficie intercambiable que los gatos y profesionales prefieren.



SUPERFICIE SUPERIOR



MATERIAL FENÓLICO
Hidrófugo y antibacteriano



REDUCE ESTRÉS FELINO
Mejor que acero inoxidable



SISTEMA INTERCAMBIABLE
Renueva solo el tablero



DISEÑO INNOVADOR

COMPARTIMENTO TRANSPORTÍN
Única con espacio inferior específico

DIMENSIONES ÓPTIMAS
90×50 cm para exploración felina

ALTURA ERGONÓMICA
90 cm previene lesiones profesionales



BENEFICIOS CLÍNICOS



PACIENTES TRANQUILOS
Diagnósticos más precisos



DIFERENCIACIÓN COMPETITIVA
Especialización en medicina felina



FLUJO DE TRABAJO
15% más pacientes diarios



VERSATILIDAD
Apta para zona de hospitalización y consulta



Ventajas Competitivas

CARACTERÍSTICA	KUN CAT	COMPETENCIA
Compartimento transportín	Exclusivo ✓	No disponible ✗
Superficie intercambiable	Sistema patentado ✓	Reemplazo completo ✗
Cantos redondeados	Tecnología diamante ✓	No disponible ✗


Especificaciones Técnicas

DIMENSIONES
90×50×90 cm

MATERIAL
Fenólico HPL:
Hidrófugo, Ignífugo, Antibacteriano.

FABRICACIÓN
Control numérico con herramientas de diamante.
Certificado CE. Diseñada y fabricada en España.

MONTAJE
Sistema rápido sin complicaciones,
además de vídeo explicativo.

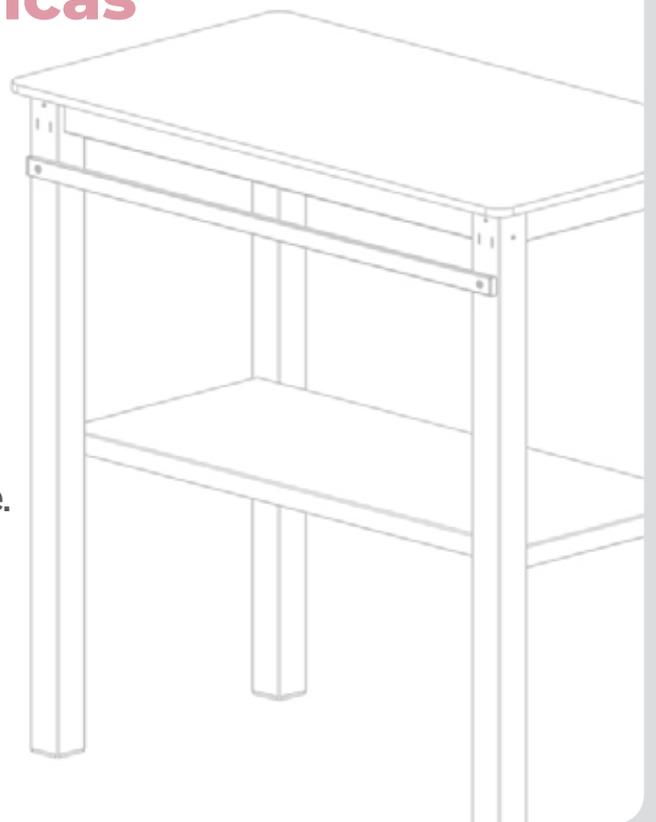

La mesa para 7 vidas



Mesa de hospitalización y consulta para gatos

REFERENCIA	MR040107
DIMENSIONES	90 x 50 x 90 cm (L x A x H)
SUPERFICIE ESPECIALIZADA PARA FELINOS	Panel fenólico blanco (Compacto HPL): Hidrófugo, ignífugo, antibacteriano y antideslizante. Cantos redondeados para mayor seguridad y confort.
ESTRUCTURA	Acero con tratamiento anticorrosión. Alta resistencia al desgaste mecánico y a la humedad.
ESTANTE INFERIOR	Útil para transportín, almacenaje u otros elementos clínicos.
RAÍL UNIVERSAL	Perfil 25 x 10 mm para accesorios modulares.
PATA REGULABLE	Adaptable a suelos irregulares.
MANTENIMIENTO	Limpieza fácil con productos comunes; materiales no porosos.
MONTAJE	Rápido, sin herramientas especializadas.
EMBALAJE	Plano y compacto. Reduce costes logísticos y el impacto ambiental.
FABRICACIÓN	100% Everest-Tecnovet Control numérico + herramientas de diamante para máxima precisión.
REPUESTO DE SUPERFICIE	Superficie desmontable, intercambiable en caso de desgaste o preferencia.
ACCESORIOS	Consulte los accesorios de rail disponibles.