

# AUTOCLAVE EUROKLAV 23S+

## DESTILADOR MELAdest 65



**Suministro de agua destilada,  
rápido y económico.**

Este práctico destilador produce agua de la mejor calidad en conformidad con lo que representa uno de los más antiguos métodos de tratamiento. Cuando se activa el equipo, aumenta la temperatura del agua, esta empieza a hervir, el vapor que produce es conducido a través de la apertura. Durante la evaporación, los productos químicos, sales y suciedad permanecen en el contenedor. La corriente fluye a través del sistema de serpentín de refrigeración en la sección superior donde se enfría y se condensa en agua destilada.

**DA020000**

## SELLADORA MELAseal 100+



**Compacta, fiable y fácil de usar.**

Después de un corto periodo de calentamiento de aprox. 2 minutos, podemos sellar con un ancho de costura de 10mm (la norma EN 868-5 requiere un mínimo de 6 mm). La nueva electrónica comprueba el tiempo y la temperatura de sellado, en caso de desviaciones aparece una señal acústica y visual.


El termostato variable permite la utilización de bolsas de diferentes fabricantes. Con la cuchilla de corte integrada podemos durante el proceso de sellado cortar las bolsas de los rollos a la medida que necesitamos.

**SB010004**



- Clase "S"
- Con Bomba de secado
- 4 Programas tipo S
- Test Bowie Dick

**MELAG®**

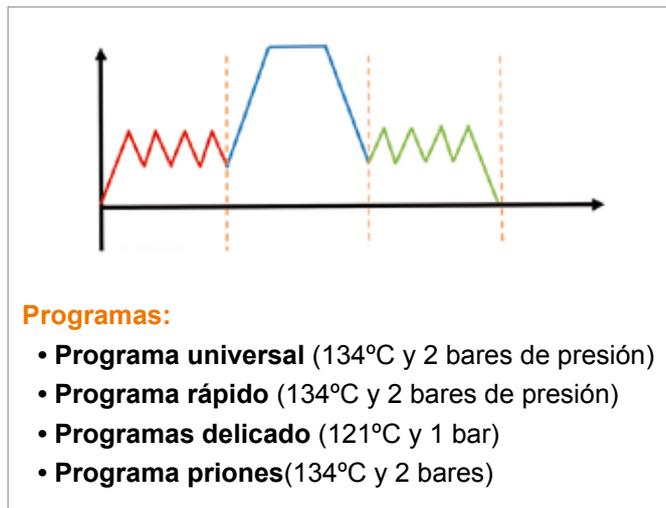

### Programas:

- Programa universal (134°C y 2 bares de presión)
- Programa rápido (134°C y 2 bares de presión)
- Programas delicado (121°C y 1 bar)
- Programa priones (134°C y 2 bares)

|                     |   |
|---------------------|---|
| Medidas de Cámara   | 45 cm largo x ø25 cm                              |
| Volumen de Cámara   | 22 litros   |
| Cantidad de carga   | 4 kg instrumentos / 0,6 kg textiles               |
| Medidas (A x H x L) | 42,5 x 48,5 x 66 cm<br>entra en encimera de 60 cm |
| Peso                | 43 Kg   |
| Conexión eléctrica  | 230V, 50Hz  |
| Potencia            | 2300W   |

**AE040200**