

ARNÉS MULTIPARAMÉTRICO



EL PRIMER ARNÉS MULTIPARAMÉTRICO


Monitoriza en tiempo real y sin cables la salud de las mascotas.

Ahorra hasta un 60% en costes relacionados con la monitorización de pacientes.

ECG · FREC · RESP · TEMP

Dinbeat UNO ofrece datos médicos de calidad y con precisión clínica. Testado y validado en hospitales veterinarios y universidades. Una herramienta de trabajo imprescindible que te permitirá, monitorizar todos los parámetros de salud importantes de tus pacientes sin la necesidad de sedarlos.

RECIBE ALERTAS EN TIEMPO REAL ESTÉS DONDE ESTÉS.

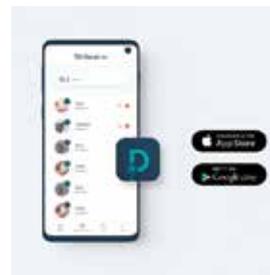

Personaliza tus alertas en función de las necesidades de tus pacientes.

DinbeatUNO te avisa si hay algún problema con el paciente monitorizado para que puedas reaccionar rápidamente. Toda la información clave en la palma de tu mano.

www.everest-tecnovet.com
info@everest-tecnovet.com T. 902 10 8848

 **EVEREST**
tecnología veterinaria

ARNÉS MULTIPARAMÉTRICO

UNO



La unidad central UNO concentra la parte más importante de la electrónica y transmisión de datos. Puede utilizarse el mismo UNO con todas las tallas de arnés.

55 gr. / 7.9x6.1x1.8 cm
Más de 90 horas de uso continuado
Avisos LED
Conector micro usb de carga
Botón on/off
Bluetooth 100 mts.

ARNÉS



Transpirable y diseñado pensando en la ergonomía y comodidad de los animales. Está compuesto por una parte textil, cableado interno y sensores. Completamente lavable, una vez extraído el UNO y el sensor de temperatura.

Lavable a mano
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL

HUB



El HUB es el responsable de procesar y transmitir toda la información recibida por uno o varios UNO a la red para ser visualizada desde el software en el cloud.

9 x 6.5 x 3.3 cm
Cable de alimentación microUSB
Hasta 5 dispositivos
Cable de red



ECG

Visualiza en tiempo real y sin cables el electrocardiograma de tus pacientes, con la máxima calidad. Almacena todas las gráficas directamente en su historial de salud.

FRECUENCIA CARDÍACA

A través de los datos obtenidos de la gráfica del electrocardiograma DinbeatUNO es capaz de calcular la frecuencia cardíaca de tu paciente. Además te avisa si el valor obtenido se encuentra por encima o por debajo de los umbrales que hayas fijado.

RESPIRACIÓN POR MINUTO

Visualiza en tiempo real la respiración por minuto de tus pacientes, sin cables, sin cálculos manuales, sin estrés para la mascota.

Temperatura

Monitorizar la evolución de la temperatura de tu paciente. Nuestro termómetro te ayuda a detectar fiebre, hipotermia, golpes de calor, etc.

Posición

La posición de tu paciente puede aportarte información valiosa en casos de lesión y dolor. Cruzando esta métrica con signos vitales podrás obtener información de valor añadido.

Actividad

Saber si el paciente está en actividad o reposo te ayudará a contextualizar métricas como la frecuencia cardíaca o el electrocardiograma.

Ladrado

Muy útil en caso de monitorización en remoto, o a domicilio para realizar el seguimiento de terapias relacionadas con la ansiedad por separación.


ARNÉS MULTIPARAMÉTRICO



XS	S	M	L	XL
18.2 cm	22.3 cm	33.5 cm	37.5 cm	41.5 cm
15.5 cm	17.5 cm	25 cm	35 cm	45 cm
37.1 cm	41.5 cm	49.5 cm	57.5 cm	72.5 cm

CONTENIDO DEL STARTER KIT

Arnés - Talla M

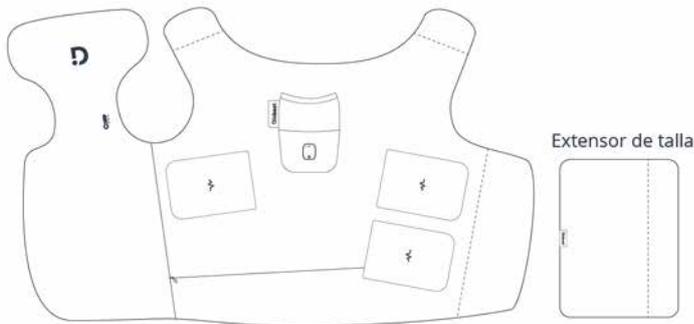

UNO



HUB



Sensor de temperatura



- Cable micro - USB - x2
- Cable Ethernet - x1
- Cargador - x1
- Parches ECG - x50
- Guía de inicio rápido - x1

DINBEAT UNO starter kit

- + Arnés talla M
- + Extensor de talla
- + UNO
- + HUB
- + Sensor de temperatura
- + Cable micro USB x2
- + Cargador
- + Cable Ethernet
- + 50 Parches ecg

EG010400