



atlas

▶ 4,167 m

📍 31° 03' 42" N, 7° 54' 57" O





VETERINARY SURGICAL TABLE
atlas

MESAS DE CIRUGÍA VETERINARIA

En los últimos 25 años diseñamos, fabricamos y actualizamos nuestras mesas y sabemos con toda certeza que son garantía de funcionalidad y durabilidad. Nuestros clientes que las adquirieron hace más de 20 años, aún siguen trabajando con ellas y hasta hoy están satisfechos con lo que ofrecen.

La Serie Atlas reúne las características más relevantes para el cirujano que busca la excelencia en su trabajo.



ACCESORIOS
diversos accesorios
disponibles

2 o 4 RAÍLES
para accesorios

SUPERFÍCIES:
"V" LIBRO o PLANA


ACCIONAMIENTO
Hidráulico o Eléctrico

BASCULACIÓN
2 tipos de basculación
según modelo.

RUEDAS AUTOBLOCANTES
fabricación alemana

SUPERFICIE "V" LIBRO
Sistema "EASY CLEAN"

Distintos tamaños

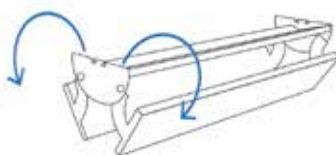

atlas

4,167 m

31° 03' 42" N, 7° 54' 57" O

DISEÑO ERGONÓMICO Y
ALTA CALIDAD EN MATERIALES

Gran variedad de accesorios
Raíles para adaptar accesorios
Garantía de 5 años
Asistencia Técnica en España
Fabricadas en España
Materiales de alta calidad

atlas
COLOUR

atlas

MC040412 eléctrica	"V" TOP	MC040402 eléctrica
MC040413 hidráulica		MC040403 hidráulica

MC040414 eléctrica	"V" TOP PLUS SIZE	MC040424 eléctrica
MC040415 hidráulica		MC040425 hidráulica

MC040432 eléctrica	PLANA	MC040422 eléctrica
MC040433 hidráulica		MC040423 hidráulica

GARANTÍA
5 años

SUPERFICIES

SUPERFICIE PLANA

Espacio de trabajo muy cómodo y limpio con reborde perimetral que evita la caída accidental de líquidos u otros al suelo.




SUPERFICIE "V" TOP - LIBRO SEMI-DESMONTABLE



Atlas Colour

SISTEMA EASY CLEAN

Facilita la limpieza de la mesa en 3 sencillos pasos

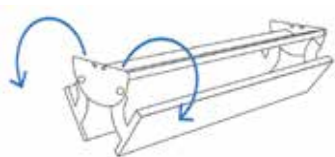

Con GANCHO para cubo de residuos + DESAGÜE



ACCIONAMIENTO

ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO

PEDAL DOBLE

Permite regular la altura desde cualquier lado.

LA ÚNICA CON ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO BILATERAL



ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO

MANDO NEUMÁTICO - MÁS SEGURIDAD

Sin contacto eléctrico entre el usuario y la mesa.

Sin riesgos de accidentes causados por mordidas del paciente a un mando eléctrico.



ACCESORIOS

GRAPA SUJECIÓN DE ANIMALES



GRAPA PARA ACCESORIOS



SOPORTE + BATEA



SOPORTE DE GOTERO



ARCO DE TRACCIÓN



PERCHA PARA TALLAS



BRAZO PARA CÁMARA DE FOTOS



ACCESORIOS INCLUIDOS*

ACCESORIOS	REF.	ATLAS INOX	ATLAS COLOUR
Grapas sujeción animales	XX500103	4 ✓	4 ✓
Grapas accesorios	GA010002	2 ✓	1 ✓
Mesa batea	MA030001	1 ✓	-
Soporte de gotero	SG010004	1 ✓	1 ✓
Arco de tracción	AC010003	1 ✓	-
Brazo para cámara de fotos	BF010001	-	-
Percha para tallas	PC010001	-	-

* Grapas y accesorios se pueden comprar separadamente.

*Accesorios NO incluidos en ventas fuera de España.

OPCIONAL: PEDAL PARA MODELOS ELÉCTRICOS

Todas las mesas de accionamiento eléctrico funcionan mediante a un mando neumático, ofrecemos opcionalmente un pedal si así lo prefiere. Consúltenos.



LA MESA ATLAS QUE MÁS SE ADAPTA A TUS NECESIDADES

2 RAÍLES
Para accesorios

BASCULACIÓN
Clásica: 30° Trendelemburg

ACERO INOXIDABLE Y GALVANIZADO
Duración excepcional, protección integral de las piezas, mayor dureza y resistencia a rayaduras.

PINTURA EPOXI
Gran resistencia tanto a químicos como a roces, resistencia a los agentes atmosféricos, fácilmente limpiable e impermeable.



4 RAÍLES
Para accesorios

BASCULACIÓN
30° Trendelemburg
10° Anti-Trendelemburg

RUEDAS AUTOBLOCANTES
Alta calidad.
Fabricada en Alemania.

ACERO INOXIDABLE
Construcción sólida y durable.
Acero inoxidable* AISI 304 y 430.

ATLAS COLOUR VS ATLAS INOX

	BASCULACIÓN	RAÍLES	RUEDAS	MATERIALES
ATLAS COLOUR	Clásica 30° Trendelemburg	2	-	Acero Inoxidable y galvanizado + pintura epoxi
ATLAS INOX	30° Trendelemburg 10° Anti-Trendelemburg	4	4 autoblocantes	Acero Inoxidable AISI 304/430

MESAS DE CIRUGÍA ATLAS

	REF.	ACCIONAMIENTO	SUPERFICIE	MEDIDA ÚTIL	MEDIDA TOTAL	ALTURA	CARGA
ATLAS COLOUR Acero Inoxidable y Galvanizado + pintura epoxi Basculación Clásica 30° Trendelemburg	MC040412	Eléctrico	"V" top	124 x 46 cm	130 x 49,6 cm	máx: 110 cm mín: 80 cm	200 kg
	MC040413	Hidráulico					1000 kg
	MC040414	Eléctrico	"V" top PLUS SIZE	140 x 56 cm	146 x 59,6 cm		200 kg
	MC040415	Hidráulico					1000 kg
	MC040432	Eléctrico	Plana	140 x 48,4 cm	140 x 48,4 cm		200 kg
	MC040433	Hidráulico					1000 kg
ATLAS Acero Inoxidable AISI 304/430 30° Trendelemburg 10° Anti-Trendelemburg	MC040402	Eléctrico	"V" top	140 x 48 cm	144,8 x 48 cm	máx: 115 cm mín: 85 cm	200 kg
	MC040403	Hidráulico					1000 kg
	MC040424	Eléctrico	"V" top PLUS SIZE	140 x 54 cm	144,8 x 54 cm		200 kg
	MC040425	Hidráulico					1000 kg
	MC040422	Eléctrico	Plana	140 x 48,4 cm	140 x 48,4 cm		200 kg
	MC040423	Hidráulico					1000 kg

VETERINARY
TABLE





EVEREST
tecnología veterinaria



atlas 

▶ 4,167 m

📍 31° 03' 42" N, 7° 54' 57" O





VETERINARY EXAMINATION TABLE
MANUFACTURED IN GERMANY
atlas
www.atlas-med.com

VETERINARY SURGERY TABLES

In the last 25 years we design, manufacture and update our tables and we know with all certainty that they are a guarantee of functionality and durability. Our customers who buy them 20 years ago, they still working with them, until today they are satisfied with what they offer. The Atlas series bring the most relevant characteristics for the surgeon who seeking excellence in his work.



4,167 m
31° 03' 42" N, 7° 54' 57" O

ERGONOMIC DESIGN AND HIGH QUALITY MATERIALS

Variety of accessories and rails to suit them
5 years of warranty
Technical support in Spain
Manufactured in Spain with high quality materials




MC040412 electric	"V" TOP	MC040402 electric
MC040413 hydraulic		MC040403 hydraulic

MC040414 electric	"V" TOP PLUS SIZE	MC040424 electric
MC040415 hydraulic		MC040425 hydraulic

MC040432 electric	FLAT	MC040422 electric
MC040433 hydraulic		MC040423 hydraulic



"V" TOP
"EASY CLEAN" system

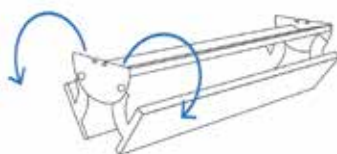

SURFACES

FLAT SURFACE

Very comfortable and clean workspace with re-edge perimeter that prevents liquids or other accidental fall to the ground.




"V" TOP SURFACE - BOOK SEMI-DETACHABLE



with HOOK for waste cube + DRAIN

EASY CLEAN SYSTEM

Facilitates the cleaning of the table in 3 easy steps.

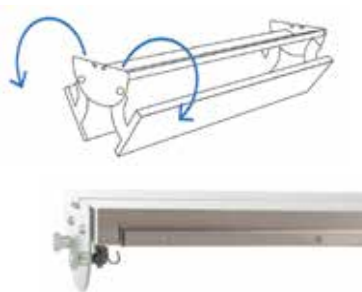

DRIVE

HYDRAULIC DRIVE

DOUBLE PEDAL

It allow to adjust the height from any side.

THE ONLY ONE WITH BILATERAL DRIVE HYDRAULIC



ELECTRIC DRIVE

PNEUMATIC CONTROL, MORE SECURITY

Without electrical contact between the user and the table. Without risk of accidents caused by bites from the patient to an electric drive.



ACCESSORIES

FIXATION CLAMP



ACCESSORIES CLAMP



TRAY + HOLDER



IV HOLDER



ARC



HOLDER FOR SURGICAL DRAPES



CAMERA HOLDER



INCLUDED ACCESSORIES

ACCESSORIES	REF.	ATLAS INOX	ATLAS COLOUR
Animal fixation clamp	XX500103	4 ✓	4 ✓
Clamp for accessories	GA010002	2 ✓	1 ✓
Tray for surgery table	MA030001	1 ✓	- ✓
IV holder	SG010004	1 ✓	1 ✓
Arc to subject animals	AC010003	1 ✓	- ✓
Camera holder	BF010001	- ✓	-
Holder for surgical drapes	PC010001	-	-

*Clamps and accessories can be purchased separately

* Accessories not included in sales outside Spain.

OPTIONAL: PEDAL FOR ELECTRIC MODELS

All electrically operated tables function by pneumatic control, a foot pedal is available as an option if desired. Feel free to ask us for more information.



THE ATLAS TABLE THAT MOST ADAPTS TO YOUR NEEDS

2 RAÍLES

European standard
accessory fixing

BASCULACIÓN

Clásica: 30° Trendelemburg

GALVANIZED AND STAINLESS STEEL

Duration exceptional, comprehensive
protection of parts, higher hardness
and resistance to scratches.

EPOXI PAINT

High resistance to chemicals and friction,
resistance to atmospheric agents, easily
cleanable and waterproof.



4 RAILS
European standard
accessory fixing

TILT
30° Trendelemburg
10° Anti-Trendelemburg

SELF-LOCKING WHEELS
High quality.
Manufactured in Germany.

STAINLESS STEEL
High quality.
Manufactured in Germany.

ATLAS COLOUR vs ATLAS INOX

	TILT	RAIL	WHEELS	MATERIALS
ATLAS COLOUR	Classic 30° Trendelemburg	2	-	Stainless and Galvanized steel + epoxi paint
ATLAS INOX	30° Trendelemburg 10° Anti-Trendelemburg	4	4 self-locking	Stainless Steel AISI 304/430

SURGERY VETERINARY TABLES

	REF.	DRIVE	SURFACE	USEFUL MEASURE	TOTAL SIZE	HEIGHT	LOAD
ATLAS COLOUR Stainless and Galvanized steel + epoxi paint Basculación Clásica 30° Trendelemburg	MC040412	Electric	"V" top	124 x 46 cm	130 x 49,6 cm	max: 110 cm min: 80 cm	200 kg
	MC040413	Hydraulic					1000 kg
	MC040414	Electric	"V" top PLUS SIZE	140 x 56 cm	146 x 59,6 cm		200 kg
	MC040415	Hydraulic					1000 kg
	MC040432	Electric	FLAT	140 x 48,4 cm	140 x 48,4 cm		200 kg
	MC040433	Hydraulic					1000 kg
ATLAS Stainless Steel AISI 304/430 30° Trendelemburg 10° Anti-Trendelemburg	MC040402	Electric	"V" top	140 x 48 cm	144,8 x 48 cm	max: 115 cm min: 85 cm	200 kg
	MC040403	Hydraulic					1000 kg
	MC040424	Electric	"V" top PLUS SIZE	140 x 54 cm	144,8 x 54 cm		200 kg
	MC040425	Hydraulic					1000 kg
	MC040422	Electric	FLAT	140 x 48,4 cm	140 x 48,4 cm		200 kg
	MC040423	Hydraulic					1000 kg

VETERINARY
TABLE





EVEREST
veterinary technology