

The logo for Atlas, featuring the word "atlas" in a bold, black, sans-serif font. To the right of the text is a stylized graphic of a human figure with a blue arc above it, composed of a grid of dots.

atlas



MESA DE CIRUGÍA



SURGERY TABLE

4,167 m

31° 03' 42" N, 7° 54' 57" O



Somos una empresa, fundada en el año 1992, especializada en la creación y distribución de productos para clínicas y hospitales veterinarios. Tenemos una amplia cartera de productos, trabajamos con marcas líderes del sector y además somos especialistas en mobiliario veterinario y equipos de anestesia, diseñados y fabricados en exclusiva por nosotros con las técnicas más avanzadas. Nuestra dedicación al estudio y desarrollo de productos nos permite ofrecer artículos de alta calidad, para así hacer más fácil la labor del veterinario tanto en España como en el mercado internacional.



www.everest-tecnovet.com

· I + D INNOVAR PARA MEJORAR

Invertimos en investigación y desarrollo pues estamos convencidos de que estar a la vanguardia de la tecnología y del diseño trae beneficios no solo a nuestra compañía, sino también a todo el sector veterinario.

· COMPETIR AL MISMO NIVEL CON FABRICANTES MUNDIALES

Hemos logrado conquistar espacios en el mercado internacional y nuestro objetivo es mostrar que en España se diseña y fabrica equipos veterinarios de calidad similar o superior a otros equipos ya consolidados en el mercado actual mundial.

· NOTABLE EVOLUCIÓN EN NUESTRO SISTEMA DE PRODUCCIÓN

En el año 2015 ampliamos nuestras instalaciones y creamos una planta exclusiva para los trabajos de producción. Hemos generado empleo de personal altamente capacitado para poner en práctica nuestros equipos.

· COLABORACIÓN DE PROXIMIDAD

Apostamos por la colaboración de proximidad y cada vez más trabajamos junto a talleres y proveedores ubicados cerca de nosotros, acciones que impulsan la economía local y la salud del planeta. Queremos asegurarnos de la excelencia de todos nuestros equipos y de la facilidad de asistencia técnica si un día es necesario.

· SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO - SAT

La tecnología actual nos ha permitido dinamizar el trabajo del SAT. A través de video-llamadas, envío de fotos para ilustrar dudas, tutoriales en vídeo y nuestro canal de YouTube, asesoramos siempre que sea posible al veterinario para facilitar su labor.

· CREEMOS EN EL SECTOR, EN LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN

Nos preocupamos del bienestar de nuestros clientes y trabajadores y les ofrecemos pequeñas grandes soluciones que marcan la diferencia en su trabajo diario. Somos humanos y tratamos con humanos. Igual que nuestro personal, nuestros clientes nunca serán un número.

· OPORTUNIDADES PARA TODOS

Everest abre las puertas y los brazos a todos. Nuestra plantilla es variada, hay gente de todas las edades, orígenes, capacidades, mujeres y hombres por igual. Tenemos puestos para prácticas de estudiantes y que en nuestra empresa han conseguido su primer empleo.

· RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

Tenemos una especial preocupación en cuidar el medio ambiente y la preservación de nuestro entorno. Estamos trabajando sin pausa para disminuir nuestro impacto medioambiental con la seriedad que exigen nuestros tiempos.

MESAS DE CIRUGÍA ATLAS

Ergonomía y seguridad en el quirófano

Las mesas de cirugía Atlas son un referente en el mercado veterinario nacional e internacional. Reconocidas por su durabilidad y destacada ergonomía, permiten prácticas seguras, limpias y con total confort para el profesional en el quirófano.



4 RAÍLES
Para accesorios

BASCULACIÓN
30° Trendelenburg
10° Anti-Trendelenburg

RUEDAS AUTOBLOCANTES
Alta calidad.
Fabricada en Alemania.

ACERO INOXIDABLE
Construcción sólida y durable.
Acero inoxidable* AISI 304 y 430.

Compacta y versátil Perfecta para clínicas felinas

Diseñada en un formato reducido, la Atlas Colour se adapta a los espacios más pequeños sin perder funcionalidad. Ideal para clínicas felinas y entornos compactos, garantiza la misma ergonomía que caracteriza a las mesas Atlas.



2 RAÍLES
Para accesorios

BASCULACIÓN
30° Trendelenburg

ACERO INOXIDABLE Y GALVANIZADO
Duración, protección integral de
las piezas, mayor dureza y
resistencia a rayaduras.

PINTURA EPOXI
Gran resistencia tanto a químicos como a
agentes atmosféricos, fácilmente limpiable
e impermeable.



SUPERFICIE V-TOP

Las mesas de cirugía Atlas cuentan con una superficie "V"-TOP, ideal para posicionar al animal de forma precisa durante cada intervención. Su sistema permite inclinaciones ajustables de hasta 30° en Trendelenburg y 10° en Anti-Trendelenburg*, adaptándose así a las necesidades específicas de cada procedimiento.

Incorporan un sistema de drenaje eficiente y un gancho para cubo de residuos, lo que garantiza un entorno de trabajo limpio y ordenado. Su estructura semi-desmontable facilita la limpieza en solo tres sencillos pasos, optimizando el tiempo entre cirugías.

Además, las mesas Atlas están equipadas con raíles para añadir accesorios, ofreciendo una solución completamente versátil y adaptable a cualquier entorno quirúrgico.



* según modelo

www.everest-tecnovet.com
info@everest-tecnovet.com

 **EVEREST**
tecnovet

ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO

SIN CABLES, EN CUALQUIER LUGAR

Única mesa de cirugía con accionamiento hidráulico bilateral. **Pedal doble:** Permite regular la altura desde cualquier lado.



ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO

MANDO NEUMÁTICO, MÁS SEGURIDAD

Sin contacto eléctrico entre el usuario y la mesa. Sin riesgos de accidentes causados por mordidas del paciente a un **mando eléctrico**.



OPCIONAL: PEDAL
para modelos eléctricos

LA MESA ATLAS QUE MÁS SE ADAPTA A TUS NECESIDADES



Con más de 20 años de experiencia, la **serie Atlas** ofrece una amplia variedad de modelos diseñados para adaptarse perfectamente a las necesidades de tu quirófano. Puedes elegir entre versiones con o sin ruedas, diferentes tamaños de superficie en "V" y accionamientos hidráulico o eléctrico, siempre con la calidad y el compromiso que caracterizan a **Everest** en todos sus productos.

MESAS DE CIRUGÍA ATLAS



ACERO INOXIDABLE AISI 304 y 430. Construcción sólida y durable.
RUEDAS AUTOBLOCANTES Alta calidad. Fabricada en Alemania.
BASCULACIÓN 30° Trendelenburg - 10° Anti-Trendelenburg
4 RAÍLES Para accesorios



ATLAS CLÁSICA - Ergonomía incomparable

Superficie	Medida útil	Medida total	Altura	Carga	Accionamiento	Ref
“V” top	140 x 48 cm	144,8 x 48 cm	máx: 115 cm mín: 85 cm	120 kg	Eléctrico	MC040402
					Hidráulico	MC040403
“V” top PLUS SIZE	140 x 54 cm	144,8 x 54 cm			Eléctrico	MC040424
					Hidráulico	MC040425



ACERO INOXIDABLE Y GALVANIZADO Duración excepcional, protección integral de las piezas, mayor dureza y resistencia a rayaduras. **PINTURA EPOXI** Gran resistencia a químicos y factores ambientales, fácilmente limpiable e impermeable.
BASCULACIÓN 30° Trendelenburg
2 RAÍLES Para accesorios



ATLAS COLOUR - Ideal para espacios reducidos

Superficie	Medida útil	Medida total	Altura	Carga	Accionamiento	Ref
“V” top	124 x 46 cm	130 x 49,6 cm	máx:110 cm mín:80 cm	120 kg	Eléctrico	MC040412
					Hidráulico	MC040413
“V” top PLUS SIZE	140 x 56 cm	146 x 59,6 cm			Eléctrico	MC040414
					Hidráulico	MC040415

ACCESORIOS DISPONIBLES *

*SE VENDEN POR SEPARADO



GRAPA SUJECCIÓN DE ANIMALES
XX500103



GRAPA PARA ACCESORIOS
GA010002




SOPORTE + BATEA
MA030001



SOPORTE DE GOTERO
SG010004



ARCO DE TRACCIÓN
AC010003

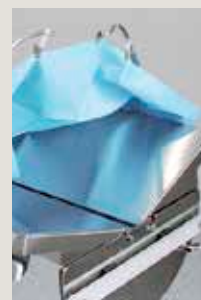

PERCHA PARA TALLAS
PC010001



Gracias por su interés en nuestros productos.
Confiamos en que esta información le sea de utilidad.
Para cualquier cuestión, estamos a su disposición.
No dude en contactar con su agente comercial o a través del teléfono
+34 936 686 715 o correo electrónico **info@everest-tecnovet.com**

Saludos,
Equipo Everest-Tecnovet



1992



2007



2022



We are a company, founded in 1992, specialised in the creation and distribution of veterinary products for veterinary clinics and hospitals. We have a wide range of products that include the leading brands in the veterinary industry and we are specialists in veterinary furniture and anaesthesia equipment designed and manufactured exclusively by us using the most advanced techniques. Our dedication to research and development of veterinary products allows us to offer the highest quality, in order to facilitate the work of veterinarians both in Spain and in the international market.



www.everest-tecnovet.com

- **R&D INNOVATE TO IMPROVE**

We invest in research and development as we believe that being at the forefront of technology and design not only benefits our company, but also the whole veterinary field.

- **COMPETING AT THE SAME LEVEL AS WORLD MANUFACTURERS**

We have managed to conquer a place in the international market and our aim is to show that in Spain we design and manufacture veterinary equipment of similar or superior quality to other equipment already consolidated in the current world market.

- **SIGNIFICANT EVOLUTION IN OUR PRODUCTION SYSTEM**

In 2015 we expanded our facilities and created a plant exclusively for production. We have generated employment of highly qualified personnel to implement our equipment.

- **CLOSE COOPERATION**

We are committed to local collaboration and increasingly work with workshops and suppliers located close to us, actions that boost the local economy and the health of the planet. We want to ensure the excellence of all our equipment and the ease of technical assistance should it ever become necessary.

- **TECHNICAL ADVISORY SERVICE - SAT**

Today's technology has allowed us to streamline the work of the SAT. Through video calls, sending photos illustrating doubts, tutorial on videos and our YouTube channel, we provide advice to veterinarians whenever possible to facilitate their work.

- **WE BELIEVE IN THE SECTOR, IN THE PEOPLE WHO ARE PART OF IT.**

We care about the well-being of our customers and employees and offer them solutions that make a difference in their daily work. We are human and we deal with humans. Just like our staff, our customers will never be a number.

- **OPPORTUNITIES FOR ALL**

Everest opens its doors and arms to everyone. We have a diverse workforce, with people of all ages, backgrounds and abilities, women and men alike. We have internships for students who have found their first job in our company.

- **RESPECT FOR THE ENVIRONMENT**

We have a special concern for the environment and the preservation of our surroundings. We are working tirelessly to reduce our environmental impact with the seriousness that our times demand.

ATLAS SURGICAL TABLES

Ergonomics and Safety in the Operating Room

Atlas surgical tables are a benchmark in both the national and international veterinary markets. Known for their durability and outstanding ergonomics, they enable safe, clean practices and provide complete comfort for professionals in the operating room.



4 RAILS
European standard
accessory fixing

TILT
30° Trendelemburg
10° Anti-Trendelemburg

SELF-LOCKING WHEELS
High quality.
Manufactured in Germany.

STAINLESS STEEL
Solid and durable construction.
Stainless steel* AISI 304 and 430.

Compact and Versatile Perfect for Feline Clinics

Designed in a compact format, the Atlas Colour adapts to smaller spaces without sacrificing functionality. Ideal for feline clinics and compact environments, it guarantees the same ergonomics that characterize Atlas tables.



2 RAILS
European standard
accessory fixing

TILT
30° Trendelemburg

GALVANIZED AND STAINLESS STEEL
Duration exceptional, comprehensive
protection of parts, higher hardness
and resistance to scratches.

STAINLESS STEEL
Solid and durable construction.
Stainless steel* AISI 304 and 430.

ATLAS SURGICAL TABLES



V-TOP SURFACE

Atlas surgical tables feature a V-TOP surface, ideal for positioning animals precisely during each procedure. This system allows adjustable tilts of up to 30° in Trendelenburg and 10° in Anti-Trendelenburg*, adapting to the specific needs of each procedure.

They incorporate an efficient drainage system and a waste bucket hook, ensuring a clean and organized workspace. Their semi-detachable structure facilitates cleaning in just three simple steps, optimizing turnaround time between surgeries.

Additionally, Atlas tables are equipped with rails for adding accessories, offering a fully versatile solution adaptable to any surgical environment.



* according to model.

www.everest-tecnovet.com
info@everest-tecnovet.com

 **EVEREST**
tecnovet

HYDRAULIC DRIVE

CORDLESS, ANYWHERE

The only surgical table with bilateral hydraulic operation. **Dual pedal:** Allows height adjustment from either side.



ELECTRIC DRIVE

PNEUMATIC CONTROL, MORE SECURITY

Without electrical contact between the user and the table. Without risk of accidents caused by bites from the patient to an electric drive.



OPTIONAL: FOOT PEDAL
for electric models

THE ATLAS TABLE THAT MOST ADAPTS TO YOUR NEEDS



With over 20 years of experience, the Atlas series offers a wide variety of models designed to perfectly meet the needs of your operating room. You can choose from versions with or without wheels, different V-shaped surface sizes, and hydraulic or electric drives, always with the quality and dedication that characterize Everest

ATLAS SURGICAL TABLES



STAINLESS STEEL AISI 304 and 430 Solid and durable construction.
AUTO-LOCKING WHEELS High quality. Made in Germany.
TILTING 30° Trendelenburg - 10° Anti-Trendelenburg.
4 RAILS For accessories.



ATLAS CLASSIC - Unmatched Ergonomics

Surface	Usable size	Total size	Height	Load	Drive	Ref
"V" top	140 x 48 cm	144,8 x 48 cm	max: 115 cm mín: 85 cm	120 kg	Electric	MC040402
					Hydraulic	MC040403
"V" top PLUS SIZE	140 x 54 cm	144,8 x 54 cm			Electric	MC040424
					Hydraulic	MC040425



STAINLESS STEEL AND GALVANIZED

Exceptional durability, comprehensive protection of parts, increased hardness, and resistance to scratches. **EPOXY PAINT** Great resistance to chemicals and environmental factors, easy to clean, and waterproof.

TILTING 30° Trendelenburg.
2 RAILS For accessories



ATLAS COLOUR - Ideal for Small Spaces

Surface	Usable size	Total size	Height	Load	Drive	Ref
"V" top	124 x 46 cm	130 x 49,6 cm	máx: 110 cm mín: 80 cm	120 kg	Electric	MC040412
					Hydraulic	MC040413
"V" top PLUS SIZE	140 x 56 cm	146 x 59,6 cm			Electric	MC040414
					Hydraulic	MC040415

AVAILABLE ACCESSORIES*

*SOLD SEPARATELY



ANIMAL FIXATION
CLAMP
XX500103



CLAMP FOR
ACCESSORIES
GA010002



TRAY +
HOLDER
MA030001



IV HOLDER
SG010004



ARC TO SUBJECT
ANIMALS
AC010003



HOLDER FOR
SURGICAL DRAPES
PC010001



Thank you for your interest in our products. We hope you find this information useful. For any question, we are at your disposal.
Do not hesitate to contact your commercial agent or by telephone **+34 936 686 715** or email info@everest-tecnovet.com

Greetings,
Everest-Tecnovet Team



1992



2007



2022